


Registro y/o Consulta de Signos Vitales

En la barra superior del Panel de Enfermería, se encuentra el acceso a la pantalla de Signos Vitales.

El ingreso se realiza a través de un clic sobre el ícono:



Se desplegará la siguiente pantalla:

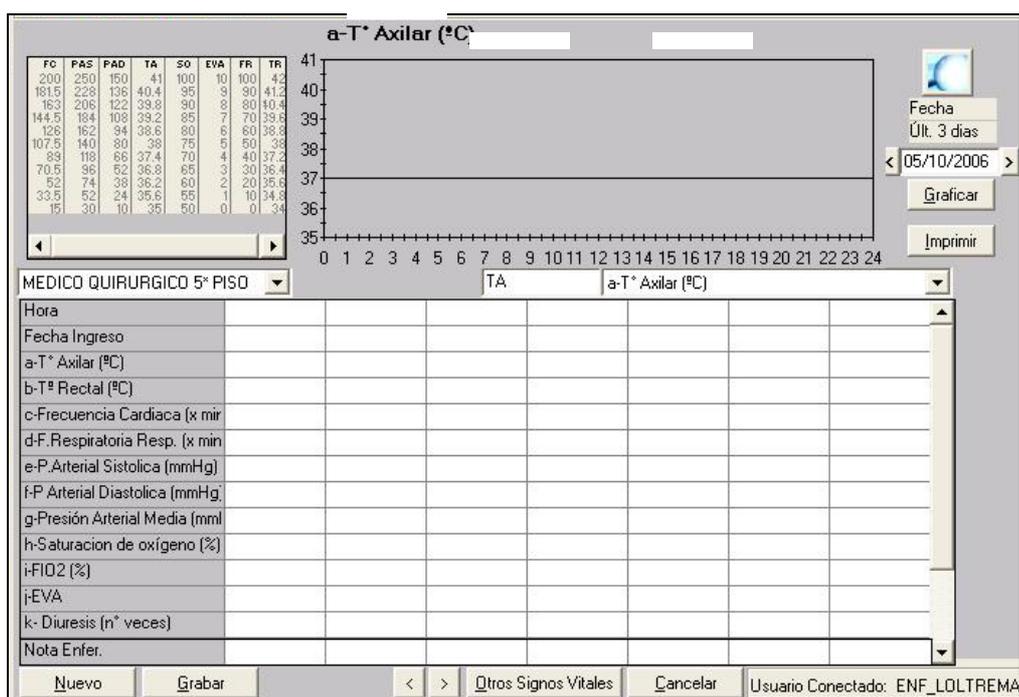


➤ Registro de Signos Vitales

Para el registro de signos vitales, proceder como se indica a continuación:

- Hacer un clic sobre el botón **Nuevo** en el extremo inferior izquierdo de la pantalla.
- En la columna habilitada (en amarillo), registrar los datos definidos por la columna izquierda.

Para el registro de la hora introducir sólo los dígitos, los dos puntos (:) se encuentran predeterminados.



Existe un parámetro de holgura de media hora de anticipación y retraso con respecto a la hora actual para el registro de signos vitales.

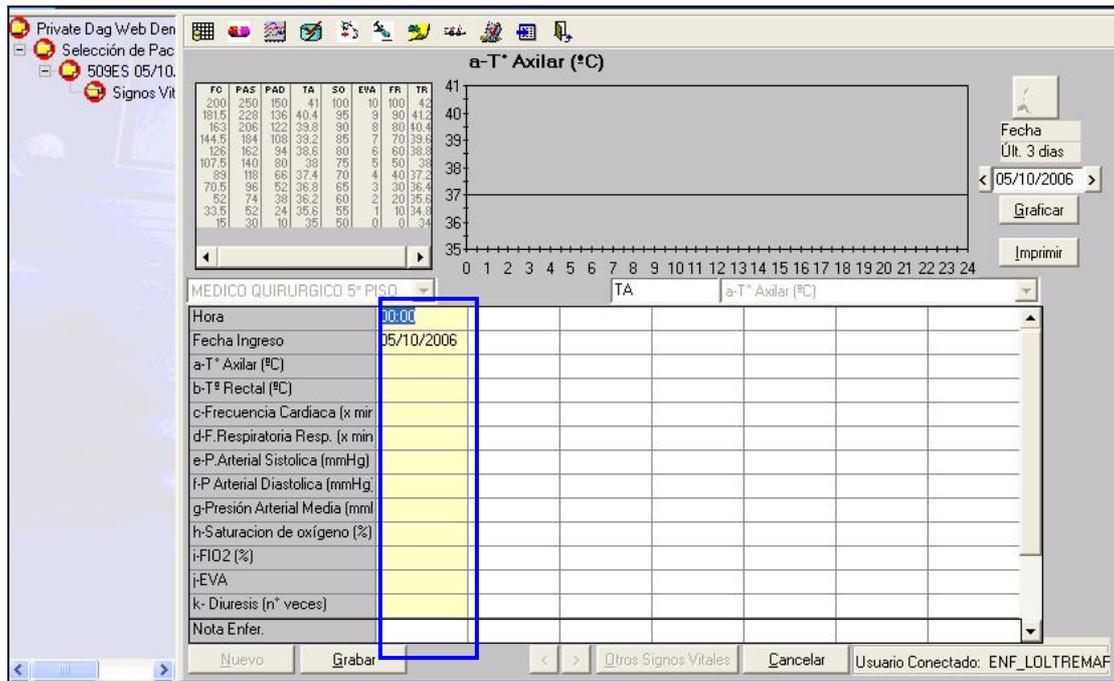

- c) Los datos numéricos decimales deben ser digitados con coma. El Panel de Enfermería no reconoce el formato punto.
Por ejemplo T° axilar: 36,8 es la manera correcta de realizar el registro.
- d) Diuresis y Deposiciones: Su registro se realiza reemplazando el signo + y - por 1 y 0 respectivamente.
- e) Al finalizar, presionar el botón GRABAR.

➤ Gráfico de Signos Vitales


Una vez realizada la grabación, en la parte superior de la pantalla aparecen inmediatamente graficados los datos registrados.
El gráfico de la temperatura axilar aparece por defecto.
Para elegir el signo vital a graficar, seleccionar desde la barra destacada:

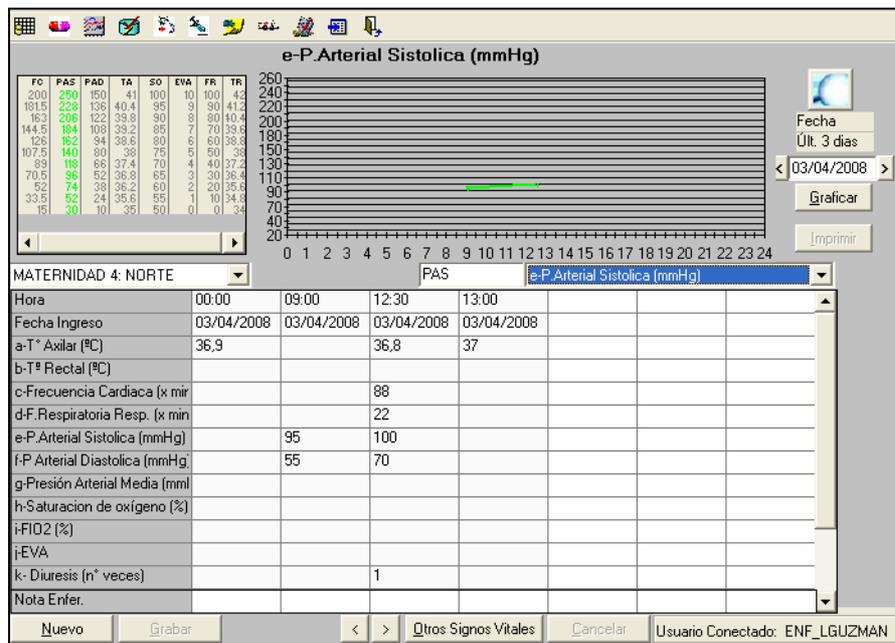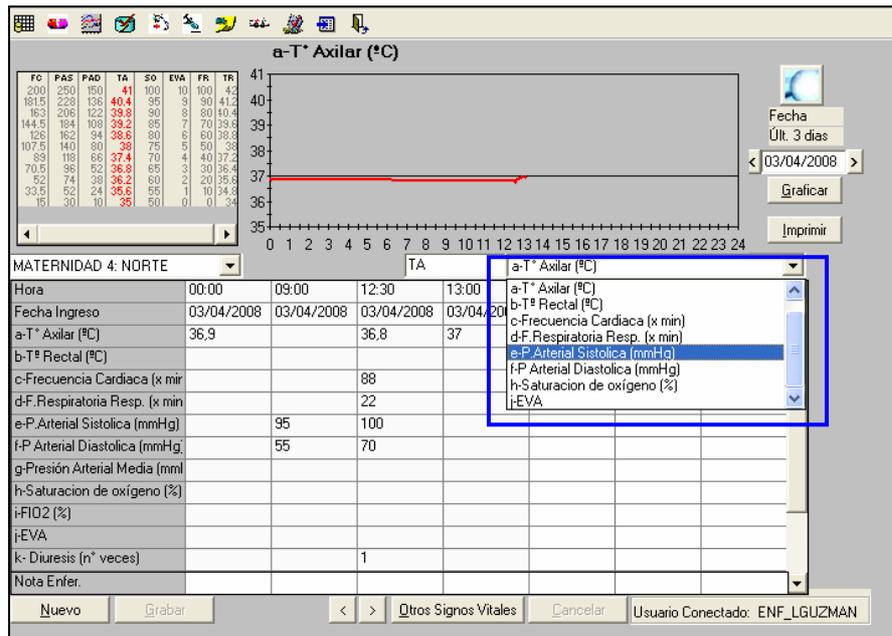

➤ Rango de tiempo establecido para el registro de Signos Vitales

Adelanto en el registro:


Cuando la hora ingresada tiene anticipación mayor al rango definido por el parámetro de holgura, el panel de enfermería despliega el siguiente mensaje e impide la grabación de los datos asociados:

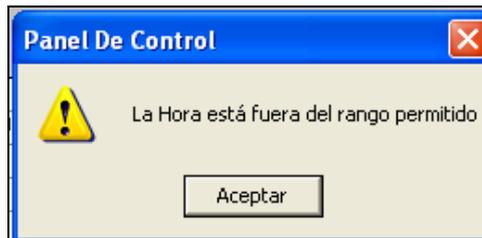

Retraso en el registro:

Si se ingresan datos con atraso, el panel de enfermería exigirá el registro de una nota de enfermería con fines de justificación.

Posterior a la grabación del registro tardío aparece el siguiente mensaje:

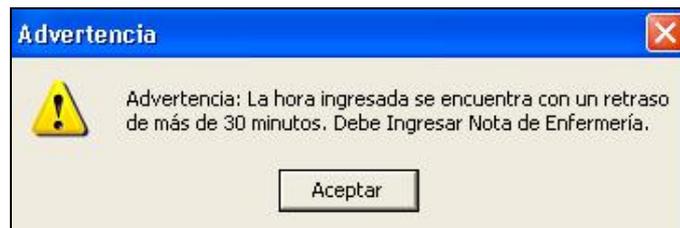


Luego de aceptar, aparece el cuadro para el registro de la "nota de enfermería obligatoria", completar con texto libre y presionar OK o ENTER para guardar y salir.

The screenshot displays a medical software interface for recording vital signs. At the top, a graph titled 'a-T* Axilar (°C)' shows a temperature trend over 24 hours. Below the graph is a table with columns for 'Hora' and 'a-T* Axilar (°C)'. A dialog box titled 'Signos Vitales' is overlaid on the interface, containing a text area for entering a nursing note and an 'OK' button. The text area contains the text: 'Retraso en el registro de signos vitales por.....'. The background interface includes various vital sign parameters listed on the left and a 'Grabar' button at the bottom.


FC	PAS	PAD	TA	SO	EVA	FR	TR
200	250	150	41	100	10	100	42
181,5	228	136	40,4	95	9	80	41,2
163	206	122	39,8	90	8	80	40,4
144,5	184	108	39,2	85	7	70	39,6
126	162	94	38,6	80	6	60	38,8
107,5	140	80	38	75	5	50	38
89	118	66	37,4	70	4	40	37,2
70,5	96	52	36,8	65	3	30	36,4
52	74	38	36,2	60	2	20	35,8
33,5	52	24	35,6	55	1	10	34,8
15	30	10	35	50	0	0	34

También es posible registrar una "nota de enfermería voluntaria" asociada a un control de signos vitales, en la cual se pueden incluir todos los datos complementarios a través de texto libre.

Para llevar a cabo el registro de una nota de enfermería voluntaria, es necesario seleccionar la última fila de la columna de datos asociados a la hora del control realizado, y a continuación con el botón derecho del Mouse pinchar el recuadro Nota de Enfermería.

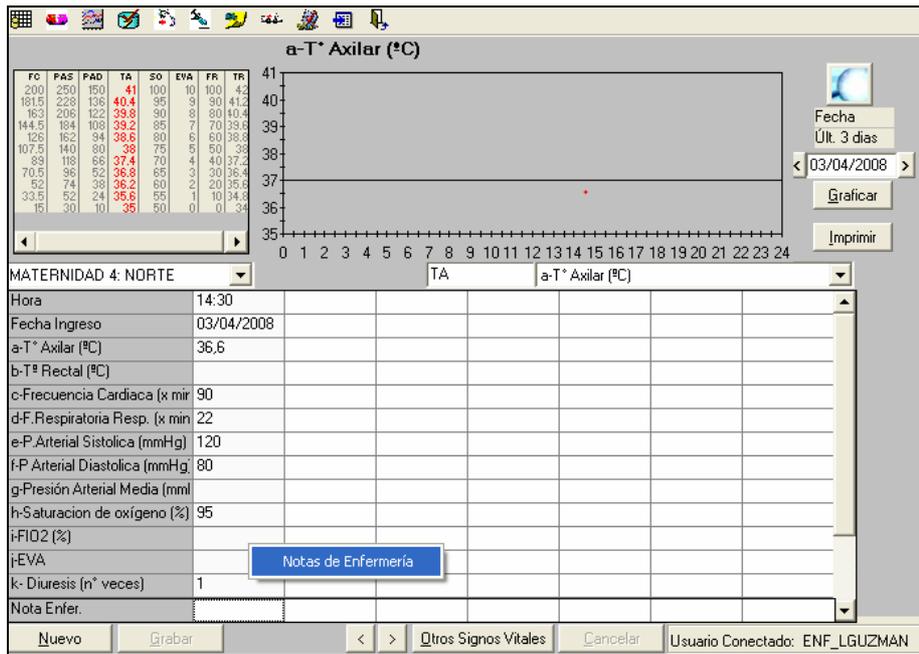

Se despliega cuadro para registro:

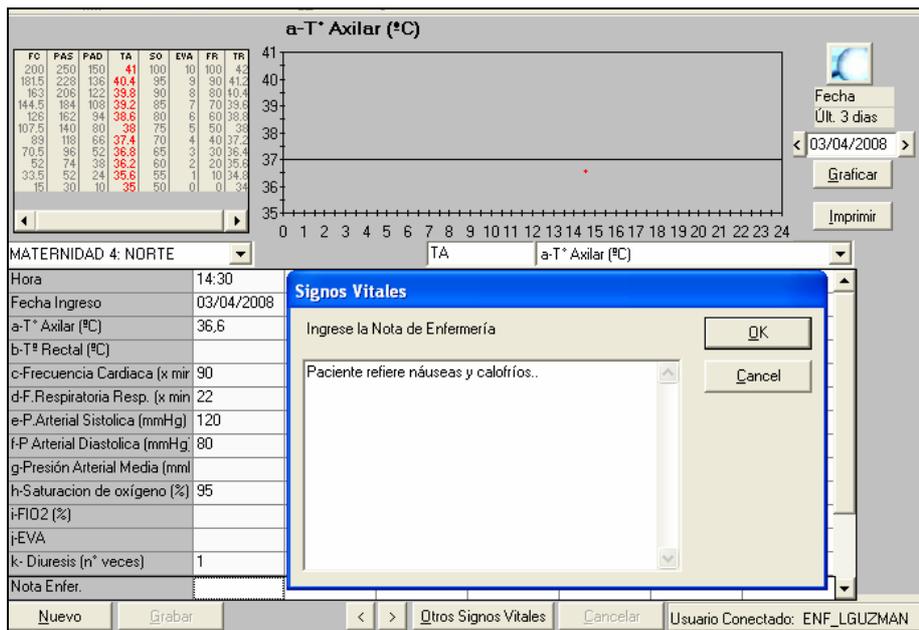

Grabar y cerrar presionando OK o ENTER.

Las notas de enfermería voluntarias quedan representadas a través de un ícono gráfico para acceder a su lectura inmediatamente (botón derecho) posterior al registro de signos vitales asociado.

Hora	14:30
Fecha Ingreso	03/04/2008
a-T° Axilar (°C)	36,6
b-T° Rectal (°C)	
c-Frecuencia Cardiaca (x mir	90
d-F.Respiratoria Resp. (x min	22
e-P.Arterial Sistolica (mmHg)	120
f-P Arterial Diastolica (mmHg)	80
g-Presión Arterial Media (mml	
h-Saturacion de oxígeno (%)	95
i-FIO2 (%)	
j-EVA	
k- Diuresis (n° veces)	1
Nota Enfer.	


Las Notas de Enfermería obligatorias no tienen un ícono gráfico asociado, pero todas pueden ser leídas seleccionando el mismo símbolo que las representa (Evolución de Enfermería) en la barra superior:



Notas de Enfermería						
	Hora	Descripción	Origen	Usuario	Fecha	
	14:30	Paciente refiere náuseas y calofríos..	SV	ENF_LGUZMAN	03/04/2008 16:08:55	
▶	15:50	Retraso en el registro de signos vitales por.....	SV	ENF_LGUZMAN	03/04/2008 15:50:24	

➤ Consulta Signos Vitales de días anteriores

Si se requiere visualizar la información de días anteriores seguir los pasos a continuación:

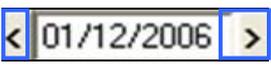- Ubicar el cursor sobre uno de los botones,  situados al lado del campo "fecha" dependiendo si se necesita avanzar o retroceder en los días y dar un clic sobre el botón correspondiente, hasta encontrar la fecha de los registros a visualizar.
- Para ver los gráficos de signos vitales correspondientes a los últimos 3 días, presionar el botón graficar :

Fecha
Últ. 3 días
< 01/12/2006 >
Graficar

